

Illico

Letto elettrico



VERMEIREN
we care for you

Illico

Pratico e confortevole

- Regolazione elettrica in altezza della base da mm. 298 a mm 828
- Regolazione elettrica della parte testa
- Regolazione elettrica della parte piedi
- Regolazioni tramite telecomando con funzione di blocco
- Dimensioni del materasso 900 mm x 2000 mm
- Carico massimo 170 kg (paziente e materasso)
- Due tipologie di sponde laterali
- Asta sollevammatati posizionabile a destra o sinistra
- 4 ruote frenanti singolarmente
- Diverse tipologie di pannelli anteriori e posteriori
- Facile da assemblare e da smontare
- Kit di trasporto su ruote
- 4 posizionatori




Semplice telecomando con funzioni di blocco



Facile rimozione dei pannelli e delle sponde laterali



Solide ruote con freno

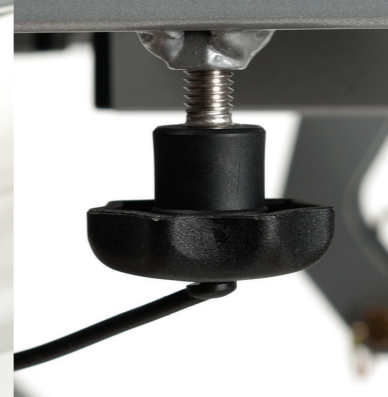

Viti in plastica a forma di stella per un facile montaggio del telaio



Un kit di trasporto su ruote per un facile spostamento del letto



Facile smontaggio del telaio senza utensili



L'asta sollevammatati può essere posizionata sia nel lato sinistro che destro del letto. La cinghia può essere regolata alla lunghezza più adatta.

L'ultima parte del supporto piedi può essere regolata manualmente in diverse posizioni.

Una singola pressione sul pulsante laterale per rilasciare le sponde laterali.

Il telecomando è dotato di un filo a spirale lungo per poterlo posizionare ovunque sul letto.

Assemblaggio ultra SEMPLICE senza strumenti

Non dovete più cercare un cacciavite o la chiave a brugola con il nostro letto Illico. Basta una sola persona per assemblare o smontare il letto in pochi minuti. Rimuovete le sponde laterali, togliete i pannelli in legno, smontate il telaio del letto e sei pronto.

Le ultime due parti pesano solo 11 e 16 kg e sono quindi molto facili da trasportare.



Pannelli di diverso colore e due tipologie di sponde laterali

Per abbinare il letto al colore degli interni di casa, Illico può essere equipaggiato di pannelli in colore scuro o color faggio.



Opzioni



Freno centrale o 4 ruote girevoli con freno



Protezioni per pareti



Prolunga (20 cm) per la superficie di appoggio

Dati tecnici

■ Larghezza totale	1024 mm
■ Altezza totale	783 - 1313 mm
■ Lunghezza totale	2080 mm
■ Altezza della rete	298 - 828 mm
■ Angolo massimo inclinazione schienale	70°
■ Angolo massimo inclinazione parte superiore delle gambe	36,8°

Sponde laterali separate

I nostri letti Illico sono disponibili anche con sponde laterali separate in metallo o in legno, a seconda della configurazione.



Prodotti pensati per te

VERMEIREN cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Siamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il letto **Illico** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

■ Angolo massimo inclinazione parte inferiore delle gambe	-17,2°
■ Materasso	RG 35, spessore 120 mm, 2000 x 900 mm
■ Portata della barra a trapezio	75 kg
■ Peso	85 kg
■ Peso massimo dell'utente	135 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate MI
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare il rivenditore più vicino a voi.